

mercury

HI-ACTIVITY

Мощность и надежное управление
на любой опорной поверхности

МЕРКУРИЙ ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ

Коленный модуль Меркурий Высокая Активность от ENDOLITE - это новый высокопрочный, и более компактный, по сравнению с предыдущими моделями, коленный модуль для активных пользователей. Повышенный максимальный вес пользователя в 150 кг позволяет использовать данный коленный модуль в самых жестких условиях. Модуль объединяет в себе высокопрочное шасси и популярный гидравлический цилиндр, кроме того в данном коленном модуле применена 25 мм геометрия и высоконадежные роликовые подшипники.

Испытания показали, что коленный модуль МЕРКУРИЙ ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ предоставляет активным пользователям наилучшую комбинацию силовых и функциональных возможностей.



Новый
весовой
диапазон
150 Кг

MERCURY

Hi-ACTIVITY

Размеры и вес

Легкий и малогабаритный, он весит всего 700 г. (без гидравлического цилиндра) и имеет высоту около 231 мм;

Крепления:

Включают в себя стандартное 4-болтовое крепление для изготовления коротких протезных систем, дополнительный сдвиговый ротационный адаптер. Кроме того Вы можете выбрать дистальное крепление с пирамидкой или стяжным адаптером под трубку голени 30 мм;

Безопасность и устойчивость:

25 мм геометрия предоставляет пользователю высокую уверенность при ходьбе. Этому коленному модулю можно смело доверять!


Используемый гидроцилиндр:

932285, 932287

Косметика и долговечность:

Шасси имеет гладкое и высокопрочное исполнение не нарушающее косметические покрытия.

Сборочные размеры

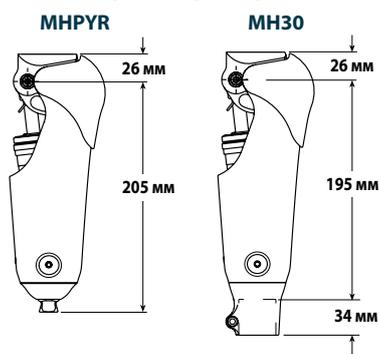

P409049



239017



189310-C



Части и Аксессуары

МНРУР
МН30
239017
189310-C
239029
239030
P409049
330146

Меркурий Высокая Активность с дистальной пирамидкой
Меркурий Высокая Активность с дистальным зажимом 30 мм
Сдвиговая ротационная пирамидка
4-болтовая пирамидка
Комплект голени (с двумя пирамидками)
Комплект голени (с одной пирамидкой)
Адаптер под пирамидку
Опора голени из углеволокна, 150 кг



Клинический сервис: ООО «Эндолайт Центр»
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 12
Тел.: +7 495 787 5279; Тел./Факс: +7 495 787 5280; E-mail: sales@endolite.ru; Web: www.endolite.ru

Поставка комплектующих: ООО «Компания ВИТА-ОПТА»
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 10
Тел./Факс: +7 495 103 4004; Email: sales@vitaorta.ru; Web: www.vitaorta.ru