
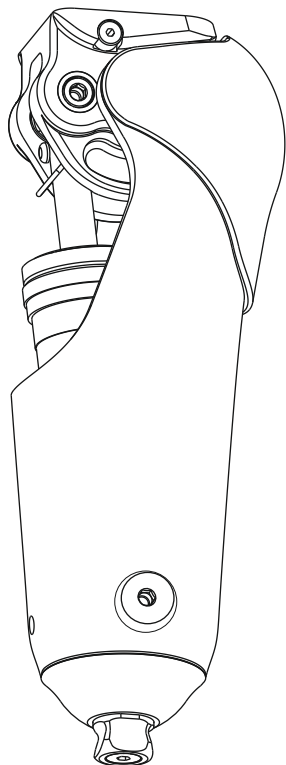
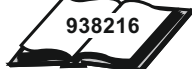
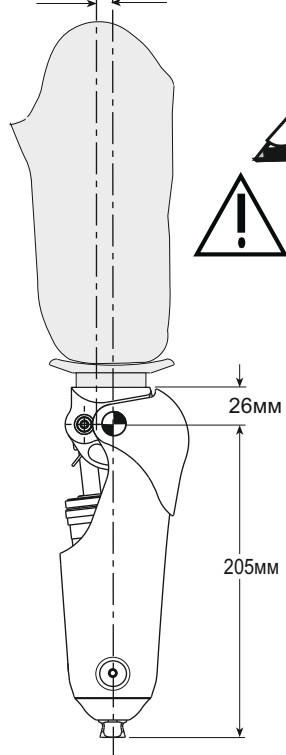


### КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ МЕРКУРИЙ ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ


**MHPYR (239352)**  
**MHDPYRS**  
**MHDPYRM**  
**239040, 239041**

Осевая линия  
нагрузки

0-5мм

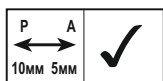

Для увеличения функциональности коленного модуля, компоненты дистального пирамидного адаптера должны быть зафиксированы с нейтральной юстировкой, а голенная система должна иметь строго вертикальное положение.

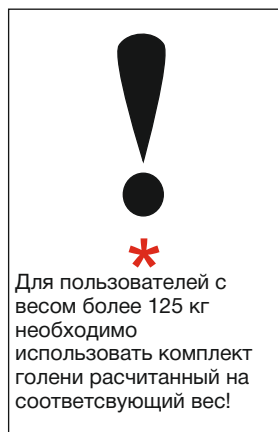

Замечание:  
 Голень для систем высокой активности и коленный шар не показаны



ИМ 13

**MH30 (239252)**  
**MHD30S**  
**MHD30M**  
**239037, 239038**

Осевая линия  
нагрузки

0-5мм

